

3-6. 保存画像の削除

保存済みの画像を削除することが出来ます

【操作手順】


- ① 患者番号枠に患者番号を入力し、
Enterまたは画像一覧(F9)を押します




- ② 削除したい画像をダブルクリックで選択します



- ③ 画面上部の削除(F8)を押します

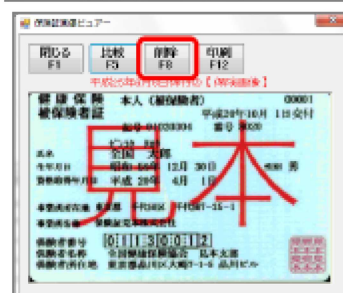

- ④ 右図の確認画面が表示されますので、
はいを押した後、
パスワード確認メッセージが表示されたら
“7419635”と入力後
入力を押してください

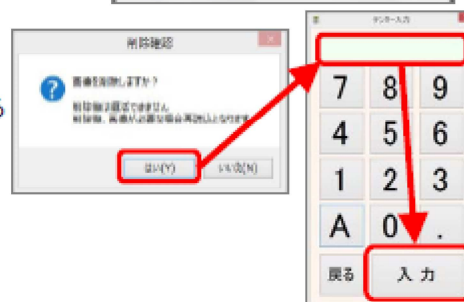

- ⑤ 右図のメッセージが表示されたら OK を押し、
削除完了です

